


Wymaz z żołądździ i rowka zażołądźdnego penisa w kierunku HPV

Materiał należy pobierać z żołądździ i rowka zażołądźdnego penisa, najlepiej z miejsc chorobowo zmienionych np. skóra na której są obecne brodawki lub kłykciny. Materiał pobierać do probówki typu Eppendorf. Pacjent nie powinien podmywać penisa przynajmniej przez 24 godz. przed wykonaniem wymazu. Nie należy pobierać materiału gdy pacjent nie zastosował się do wstrzymania od podmywania penisa przed pobraniem materiału. Wirus HPV bytuje w ludzkich komórkach nabłonkowych i po umyciu penisa jest duża szansa, że w probówce będzie obecna zbyt mała ilość złuszczonej komórek nabłonkowych aby wynik analizy był informacyjny. Próbkę należy pobierać wymazówką poprzez kilkakrotne pocieranie spiralnym ruchem w szczególności rowka zażołądźdnego i żołądździ penisa. Następnie wymazówkę umieścić w podłożu transportowym.

Próbki można umieszczać i transportować w następujących podłożach:

Rodzaj podłoża transportowego	Stabilność materiału w temperaturze pokojowej	Stabilność materiału w temperaturze lodówki
SurePath (fiolka z niebieską nakrętką)	do 14 dni, w celu wykonania badania u mężczyzny należy odlać ok. 1 ml podłoża do sterylnej probówki typu Eppendorf.	do 30 dni
Cobas-Roche/PreservCyt Solution (duże fiolki z białą nakrętką)	Do 6 miesięcy, w celu wykonania badania u mężczyzny należy odlać ok. 1 ml podłoża do sterylnej probówki typu Eppendorf.	do 6 miesięcy
Wymazówka bez podłoża transportowego	24 godziny	24 godziny

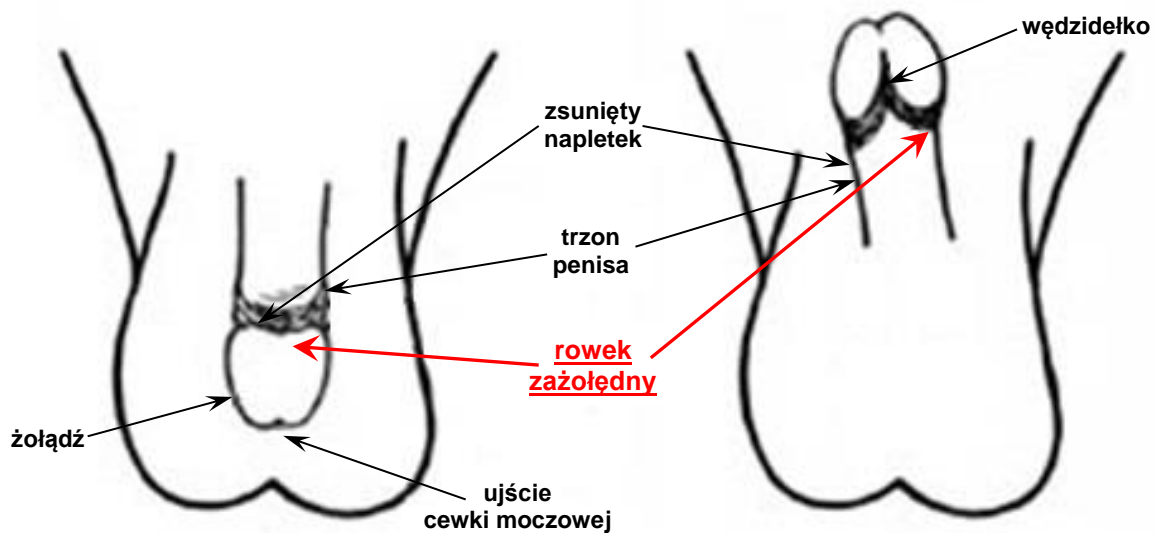

Rys. 1 Miejsce pobrania wymazu.

Probówki należy szczelnie zakręcić, podpisać imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Pobrany materiał pakujemy do woreczka np. strunowego i umieszczamy w kopercie bąbelkowej, a następnie wysyłamy lub przywozimy samodzielnie do laboratorium **MEDGEN** przy **ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a, 02-954 Warszawa.**

Nie należy wysyłać materiału w piątki i weekendy ze względu na przedłużony czas transportu.

Kontakt tel. – 501 377 150, 797 028 315, rejestracja@medgen.pl